


## МЕДИЧНІ ПАНЕЛІ

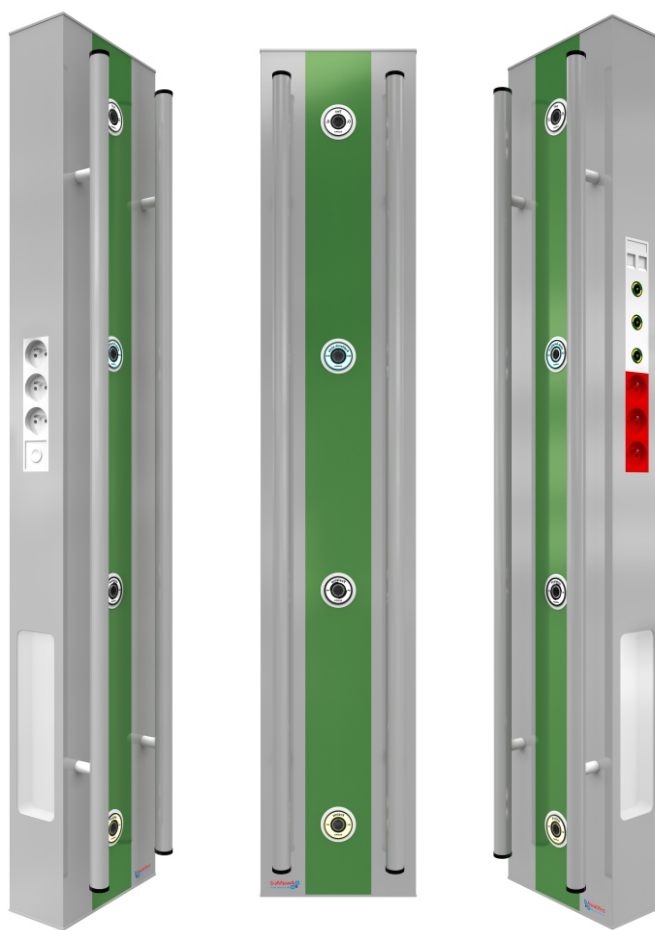

## ДОКУМЕНТАЦІЯ

Панель медична цніверсальная  
**AWA Vertical 13**

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- панель універсальна одинарна,
- профіль виготовлений з алюмінію,
- можливість порошкового фарбування в кольори з палетки RAL або отримання кольору за допомогою анодування,
- виділений канал для пунктів видачі медичних газів в системі AGA або DIN,
- підготовка до системи виклику (коробка для монтажу гнізда монтується перпендикулярно до поверхні підкладки)
- доступ до електромережі, технічного обслуговування або заміни передньої стінки медсанчастини, не знімаючи панель від стіни.
- можливість розширення панелі додатковими електричними розетками без необхідності розбирання медичної панелі

**ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 1 МІСЦЯ:****РОЗЕТКИ МЕДИЧНИХ ГАЗІВ**

- виготовлено в стандарті DIN або AGA,
- встановлено зі сторони контролю-вентиляції,
- кількість пунктів видачі газу: кисень, стиснене повітря, вакуум, закис азоту (до 15 пунктів в одній позиції, відповідно до побажання клієнта)
- манометр контрольний тиску газу, встановлений на передній панелі.

**ЕЛЕКТРИЧНІ РОЗЕТКИ**

- встановлені на одному рівні з поверхнею корпусу або над нею,
- виконання в модулі французьким 45мм x 45мм,
- кількість електричних розеток відповідає побажанням клієнта,
- кількість розеток рівно потужних відповідає побажанням клієнта.

**СИСТЕМА ВИКЛИКУ**

- підготовка отвору для розетки системи виклику.

**РОЗЕТКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ**

- комп'ютерні роз'єм RJ45, RJ11.

**ОСВІТЛЕННЯ ЗАЛИ**

- освітлення від 2W до 5 W включається вимикачем на панелі або маніпулятором системи виклику (за бажанням).

**ОСВІТЛЕННЯ ПАЦІЄНТА**

- Загальне освітлення, наприклад T5 2G11 потужність одного однієї люмінесцентної лампи від 18W до 80W, включається вимикачем на передній панелі або маніпулятором системи виклику (за бажанням).

**ОСВІТЛЕННЯ МІСЦЕВЕ**


- освітлення від 2W до 5 W включається вимикачем на панелі або маніпулятором системи виклику (за бажанням).

**Канали:**

- Канал А призначений для електроустановки - бічне освітлення та електричні розетки.
- Канал В, призначений для установки пунктів видачі медичних газів.
- Канал С, призначений для електроустановки - бічне освітлення та електричні розетки.

**Гарантія виробника:**

- 24 місяці

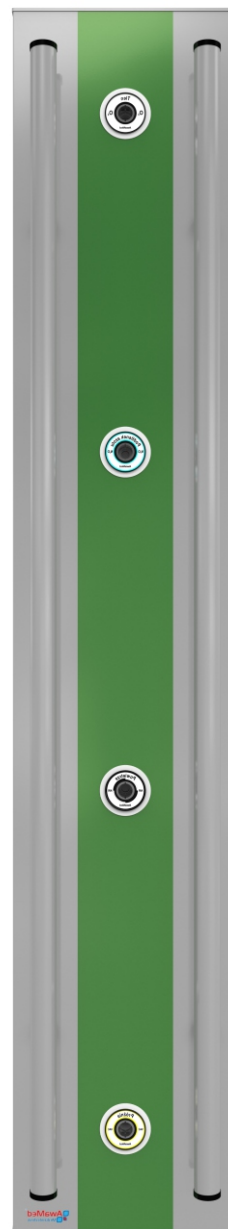

Канал А

Канал В


Канал С

**Розмір:**





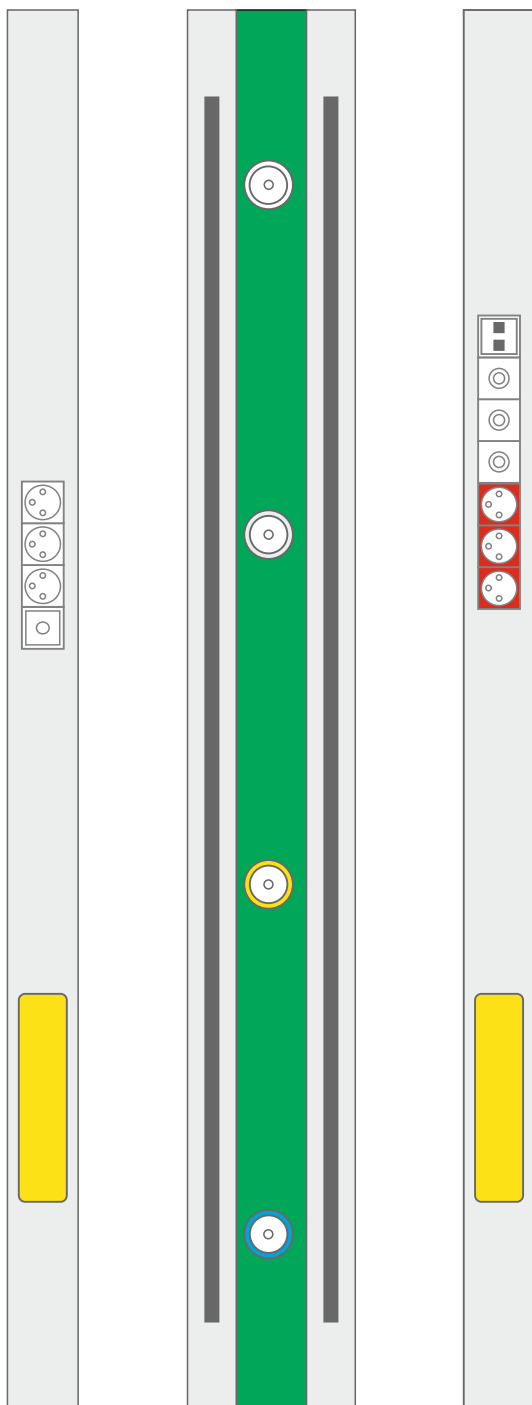


- ширина 222,50 mm,
- глибина 93,50 mm,
- висота 1200 mm.



ПРИКЛАДОВЕ ОБЛАДНАННЯ



ЛЕГЕНДА

-  роз'єм із заземленням
-  роз'єм DATA із заземленням
-  роз'єм вирівнювання потенціалів
-  комп'ютерний роз'єм RJ45 подвійний
-  вимикач
-  гніздо системи виклику
-  флуоресцентна лампа
-  медична шина
-  кисень
-  оксид азоту
-  стиснене повітря
-  вакуум

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ



РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ



AWAMED Medizintechnik Arkadiusz Warzyński  
 Відділ Продажу ТЕЛ. 91 4876849 | ФАКС 91 4323788 |  
 ул. Сантоцка 44; 71-083 Щецин; www.awamed.pl

13 років  
досвіду

20 осіб  
на виробництві

50  
виконуваних  
об'єктів в рік

200  
продуктів



awamed@awamed.pl  
www.awamed.pl



tel. 91 48 76 849  
fax 91 43 23 788