

МЕДИЧНІ ПАНЕЛІ



ДОКУМЕНТАЦІЯ

Панель медична цніверсальная
AWA Vertical 24

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- панель універсальна одинарна,
- профіль виготовлений з алюмінію,
- можливість порошкового фарбування в кольори з палетки RAL або отримання кольору за допомогою анодування,
- виділений канал для пунктів видачі медичних газів в системі AGA або DIN,
- підготовка до системи виклику (коробка для монтажу гнізда монтується перпендикулярно до поверхні підкладки)
- доступ до електромережі, технічного обслуговування або заміни передньої стінки медсанчастини, не знімаючи панель від стіни.
- можливість розширення панелі додатковими електричними розетками без необхідності розбирання медичної панелі

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 1 МІСЦЯ:**РОЗЕТКИ МЕДИЧНИХ ГАЗІВ**

- виготовлено в стандарті DIN або AGA,
- встановлено зі сторони контролю-вентиляції,
- кількість пунктів видачі газу: кисень, стиснене повітря, вакуум, закис азоту (до 15 пунктів в одній позиції, відповідно до побажання клієнта)
- манометр контрольний тиску газу, встановлений на передній панелі.

ЕЛЕКТРИЧНІ РОЗЕТКИ

- встановлені на одному рівні з поверхнею корпусу або над нею,
- виконання в модулі французьким 45мм x 45мм,
- кількість електричних розеток відповідає побажанням клієнта,
- кількість розеток рівно потужних відповідає побажанням клієнта.

СИСТЕМА ВИКЛИКУ

- підготовка отвору для розетки системи виклику.

РОЗЕТКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

- комп'ютерні роз'єм RJ45, RJ11.

ОСВІТЛЕННЯ ЗАЛИ

- освітлення від 2W до 5 W включається вимикачем на панелі або маніпулятором системи виклику (за бажанням).

ОСВІТЛЕННЯ ПАЦІЄНТА

- Загальне освітлення, наприклад T5 2G11 потужність одного однієї люмінесцентної лампи від 18W до 80W, включається вимикачем на передній панелі або маніпулятором системи виклику (за бажанням).

ОСВІТЛЕННЯ МІСЦЕВЕ

- освітлення від 2W до 5 W включається вимикачем на панелі або маніпулятором системи виклику (за бажанням).

Канали:


- Канал А призначений для електроустановки - бічне освітлення та електричні розетки.
- Канал В, призначений для установки пунктів видачі медичних газів.
- Канал С, призначений для електроустановки - бічне освітлення та електричні розетки.

Гарантія виробника:


- 24 місяці




Канал А Канал В Канал С

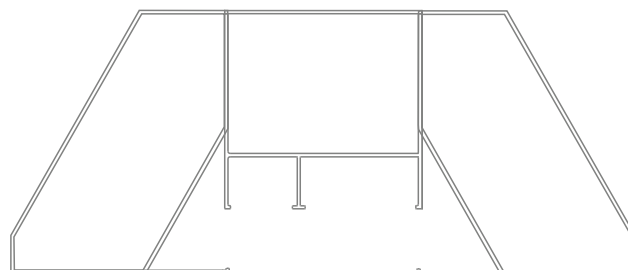**Розмір:**



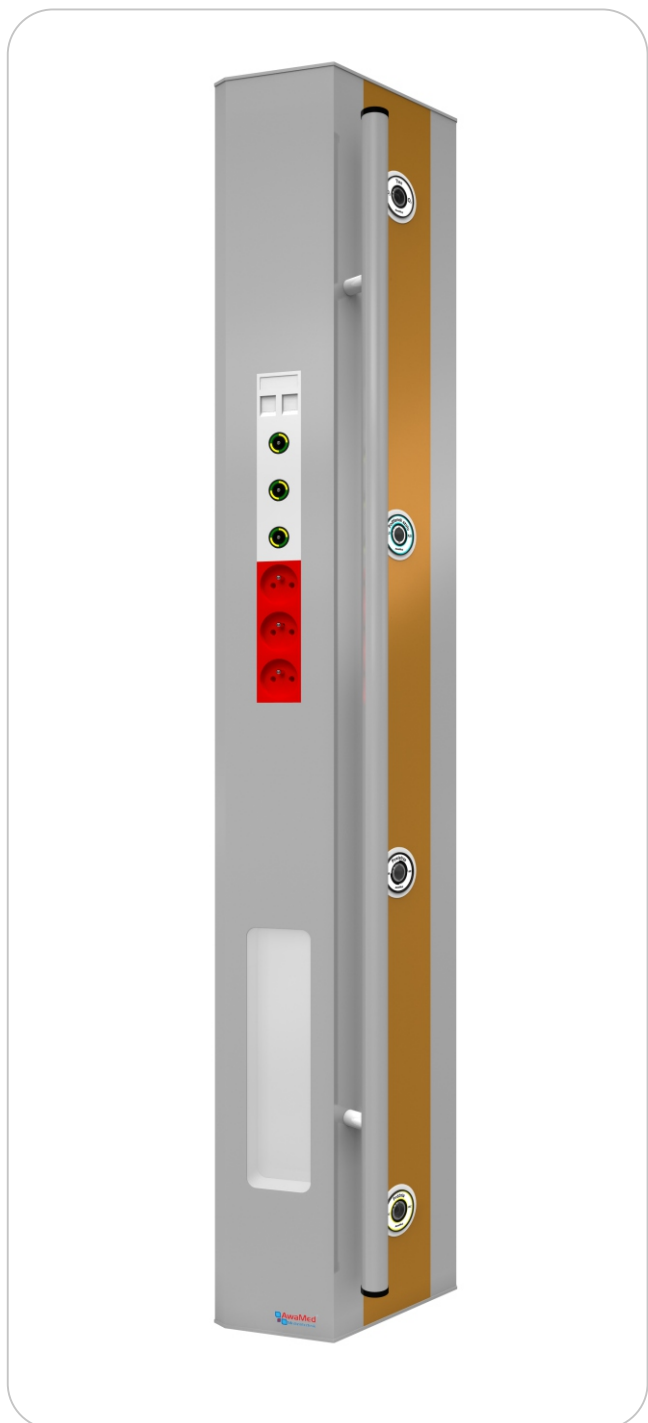

- ширина 280,50 mm,
- глибина 93,50 mm,
- висота 1200 mm.

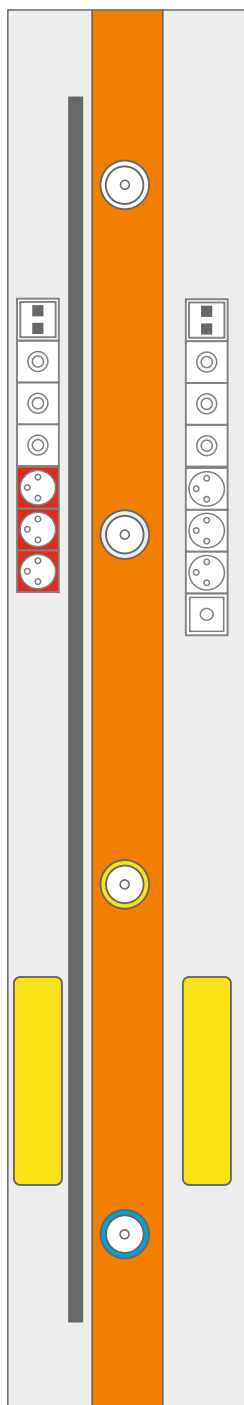

ПРИКЛАДОВЕ ОБЛАДНАННЯ



ЛЕГЕНДА

-  роз'єм із заземленням
-  роз'єм DATA із заземленням
-  роз'єм вирівнювання потенціалів
-  комп'ютерний роз'єм RJ45 подвійний
-  вимикач
-  гніздо системи виклику
-  флуоресцентна лампа
-  медична шина
-  кисень
-  оксид азоту
-  стиснене повітря
-  вакуум

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ



РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ



AWAMED Medizintechnik Arkadiusz Warzyński
Відділ Продажу ТЕЛ. 91 4876849 | ФАКС 91 4323788 |
ул. Сантоцка 44; 71-083 Щецин; www.awamed.pl

13 років
досвіду

20 осіб
на виробництві

50
виконуваних
об'єктів в рік

200
продуктів



awamed@awamed.pl
www.awamed.pl



tel. 91 48 76 849
fax 91 43 23 788